

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



You can only treat what you see!

2018/09/03(月) ▶ 2018/11/30(金)

EXPERIENCE THE DIFFERENCE
LED^{HQ}ヘッドライト&
双眼ルーペ特別価格キャンペーン

30% off !!



期間限定
30% off

LEDルーペライト2 / LEDマイクロライト2 (コード式)
LED LoupeLight 2 / LED MicroLight 2 Plug-in



LEDルーペライトとLEDマイクロライトが大きく進化しました。


高品位でシャープな輪郭のスポット光を発するハイネのLEDライトシステム。そのLEDライトのクオリティと光量が大幅にアップしました。バッテリーのサイズと重量が約3分の1になり、携帯性も大幅に向上しました。

特長

- **高品質LED**
色温度4000ケルビン、演色評価数(CRI) 90と病変部位の観察に適した高品質なLEDを使用しています。
- **高出力2W**
55000ルクスとさらなる驚異的な明るさを実現しました。
- **優れたメンテナンス性**
コード交換が容易になりメンテナンス性が向上しました。
- **ハイネ多層レンズシステム**
4層のレンズシステムがシャープな輪郭のスポット光を形成し観察部位を明るく均一に照射します。



一般的なLEDライト
光の拡散と光量のロス

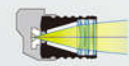

ハイネ多層レンズシステム
シャープで均質なスポット光

重量：22g(ケーブル含まず)
寿命：約50,000時間
連続使用時間：実用光量にて約9時間 最大光量にて約4時間(4時間充電)
スポットサイズ：81mm(作業距離420mm)
従来のLEDマイクロライトとLEDルーペライトおよびmPackLL携帯バッテリーとの互換性はありません。

LEDルーペライト2とML4LEDヘッドライトには、明るくシャープな解像力と広い観察視野を実現した双眼ルーペが取り付けられています。

- **ルーペ光学部の跳上げ/旋回機能(iビュー)**
双眼ルーペの光学部を上方に移動または旋回させ、拡大と裸眼観察の切り替えを行います。照明光はそのままに裸眼で観察を行う時に便利です。

ML4用



LEDルーペライト用



- **シャープな解像力**
最新の光学設計から生まれたアクロマートレンズと独自のマルチコーティング技術が、色収差のない明るく鮮明な像を提供します。観察視野が広く被写界深度が深いので自然な姿勢で快適に拡大観察が行えます。

- **防塵・防水機構**
精密な光学部を塵や埃から守ります。洗浄や消毒も簡単に行えます。

倍率/焦点距離	視野径	被写界深度*
2.5倍/340mm	90mm	110mm
2.5倍/420mm	130mm	180mm

* 被写界深度とは、対象物に焦点が合う前後の範囲のことをいいます。

期間限定
30% off

LEDルーペライト2 / LEDマイクロライト2 (コード式)
LED LoupeLight 2 / LED MicroLight 2 Plug-in



Sフレームタイプ

ノーズパッドやテンプルを自由に調節できるので
どなたにも快適にフィットします。(重量122g)



プロフェッショナルヘッドバンドタイプ

優れた装着感で長時間の使用も快適です。
眼鏡をかけたまま装着できます。(重量277g)

Sフレーム LEDルーペライトシステム

セット構成 LEDルーペライト2 + 双眼ルーペ+iビュー + Sフレーム +
mPack mini + USB ACアダプター + 収納ケース + 交換用ケーブル*

● 2.5倍/340mm MC2018-101
● 2.5倍/420mm MC2018-102 ¥ 442,600 ▶ **¥ 309,820**

ヘッドバンド LEDルーペライトシステム

セット構成 LEDルーペライト2 + 双眼ルーペ+iビュー + ヘッドバンド +
mPack mini + USB ACアダプター + 交換用ケーブル*

● 2.5倍/340mm MC2018-201
● 2.5倍/420mm MC2018-202 ¥ 442,600 ▶ **¥ 309,820**

*... 交換用ケーブルは最初にセットされているものとは別に予備として付属しています。

Sフレームタイプ

超軽量でフィット感に優れています。(重量73g)



軽量ヘッドバンドタイプ

眼鏡をかけたまま装着でき、照明光の微妙な位置調節も
自由に行えます。(重量160g)

LEDマイクロライト2 Sフレームセット

セット構成 LEDマイクロライト2 + Sフレーム + mPack mini + USB ACアダプター + 収納ケース + 交換用ケーブル*

● MC2018-301 ¥ 295,600 ▶ **¥ 206,920**

LEDマイクロライト2 軽量ヘッドバンドセット

セット構成 LEDマイクロライト2 + 軽量ヘッドバンド + mPack mini + USB ACアダプター + 収納ケース + 交換用ケーブル*

● MC2018-401 ¥ 261,600 ▶ **¥ 183,120**

*... 交換用ケーブルは最初にセットされているものとは別に予備として付属しています。



LEDマイクロライト2/LEDルーペライト2 専用充電トランス **LI ION**

■ 軽量コンパクト

わずか95gの軽量ボディ。手に収まるコンパクトサイズです。
従来品に比べ、サイズと重量が約1/3になりました。

■ 携帯性

オプションでベルトクリップを用意しています。

● X-007.99.650 mPack mini + USB ACアダプター ¥ 72,600
● X-007.99.649 mPack mini 本体 ¥ 63,400

X-000.99.007 ベルトクリップ mPack mini用 ¥ 5,900

期間限定
30% off

ML4 LEDヘッドライト アンプラグド
ML4 LED HeadLight UNPLUGGED



高出力LEDライトとバッテリーが一体となった製品です。

ケーブルのわずらわしさがなく自由で快適な操作感が得られます。ヘッドバンドは頭全体にフィットし長時間の使用も快適です。明るく照射された部位を鮮明に拡大観察することができます。(重量 519g)

mPackアンプラグド



リチウムポリマーバッテリーの使用により2時間の充電で約3時間半の連続使用が可能です。バッテリーインジケータ内蔵。



ヘッドバンド調光器

電源のオン/オフと調光を行います。



スポットサイズ選択レバー

30mm~80mmの範囲で連続可変。
(420mm離れた位置で測定)

高出力LEDライト (5W)

照度50,000Lux (作業距離 250mm)
色温度4,500Kelvinという驚異的な明るさを実現。点灯時間も50,000時間と優れた経済性を誇ります。

ML4 LEDヘッドライト アンプラグド EN50スタンドセット

セット構成 ML4 LEDヘッドライト アンプラグド + 双眼ルーペ+iビュー + EN50壁掛け充電トランス+スタンド

● 2.5倍/340mm MC2018-501

● 2.5倍/420mm MC2018-502

¥ 498,800 ▶ **¥ 349,160**

ML4 LEDヘッドライト アンプラグド ACセット

セット構成 ML4 LEDヘッドライト アンプラグド + 双眼ルーペ+iビュー + 充電用ACアダプター

● 2.5倍/340mm MC2018-601

● 2.5倍/420mm MC2018-602

¥ 442,600 ▶ **¥ 309,820**

オメガ500 LED双眼倒像鏡 アンプラグド / ML4 LEDヘッドライト アンプラグド 共通充電トランス

常に最適な充電状態を維持する壁掛けタイプと手軽に充電を行うACアダプタータイプからお選びください。



EN50壁掛け充電トランス

ヘッドの掛け外しに連動して照明光がオン/オフするインテリジェント設計。光学部を安全に収納しバッテリーを常にベストの状態に保ちます。予備のmPackアンプラグドも同時に充電することができます。



EN50壁掛け充電トランス用スタンド

EN50壁掛け充電トランスを取り付け
卓上に設置することができます。
(設置スペース: W280×D300×H450)



mPackアンプラグド充電用ACアダプター

(コードの長さ2m)

M.E. Technica
株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
TEL 06-6479-1707 FAX 06-6479-1708
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

http://www.met Technica.co.jp/ E-mail: infomet@met Technica.co.jp

製品価格に消費税は含まれておりません。製品の仕様および定価は予告なく変更することがあります。製造販売業許可番号: 1382X00180
201808-1-10000