

眼科用往診ケース



眼科往診時に使用する単眼倒像鏡、スリットランプ、手持眼圧計を安全に収納します。フリースペースも設けており、診察に必要な機器を持ち運びできます。

■ **軽量化と強度を両立したABS樹脂製ケース**

一部にアルミ素材も採用し、高いデザイン性と堅牢性を兼ねています。

■ **イノアック社 ウレタンスポンジを採用**

波形ウレタンスポンジで機器等を押さえることによりしっかり固定。移動時も安心です。

■ **グリップは人間工学に基づいた設計**

しっかりと握れて長時間でも疲れにくい形状です。



MU-410LN 眼科用往診ケース

¥32,000(税別)

外寸：W410×H300×D90mm (持手と足の部分含む) ※鍵付

材質：外側 ABS樹脂+アルミ / 内側 ウレタンスポンジ 重量：1290g

260

アイケアic200 手持眼圧計

104

A.R.非球面レンズ

79

161

下段(フリースペース)115×D25

72

マイクロレー

USBコード

単眼倒像鏡ヘッド 3.5V

104

HSL
ルーペアタッチメント 10倍

NEED MORE PROBES?
Contact your local dealer.
www.icaretonometer.com
where to buy from

QUALITY
INSPECTED
BY ICARE

手持眼圧計用
ディスプレイプローブ

φ50

70

ハンドヘルド
スリットランプヘッド 3.5V

ベータ4 USB充電ハンドル

ACアダプター

30

144

59



C-002.14.602 HSL 150 ハンドヘルドスリットランプヘッド 3.5V ¥115,000
 角膜、前房、虹彩、水晶体など前眼部の精密な検査に使用します。スリット光の幅や光量を調節して左右にスキャンしたり、観察部位の前後に焦点を合わせることで、より正確に病変の程度や位置を知ることができます。付属のフルオレセイン検査用のコバルトブルーフィルターを使用して、角膜上皮障害や欠損の有無を観察することができます。
 スリット幅×長さ：0.2mm×10mm～4mm×14mm



C-002.33.000 単眼倒像鏡ヘッド 3.5V ¥106,000
 操作性に優れたコンパクトな製品です。コントロールスリーブの回転によりダイヤフラムが連続的に可変し、シャープな輪郭のスポット光を形成します。血管のコントラストを高めるレッドフリーフィルターの挿入もワンタッチで行えます。



- **C-000.17.225** A.R.非球面レンズ 16D ¥48,800
- C-000.17.228** A.R.非球面レンズ 20D ¥48,800
- C-000.17.231** A.R.非球面レンズ 30D ¥51,600

口径の大きな光学ガラスを使用した眼底観察用レンズです。ハイネ独自のマルチコーティング技術が光の反射を0.3%に抑え、明るくクリアな眼底像を提供します。観察視野が広く眼底周辺まで歪みなくシャープに観察できます。



X-007.99.388 ベータ4 USB充電ハンドルセット ¥54,200
 バッテリー残量を知らせるLEDインジケーターを内蔵しています。
 インジケーター：● 要充電 ●(点滅) 充電中 ● 充電完了
 連続使用時間：約3時間 フル充電：約4時間(付属の純正ACアダプター使用時)
 重量：235g




FUNCTIONALITY WITH COMFORT



- 😊 極小のプローブは優しく角膜に接触します。痛みはなく、麻酔薬は不要です。
- 📦 個包装されたディスプレイプローブは、感染症や微生物汚染の心配がありません。
- 👤 座位、仰臥位だけでなく、プローブを下方に向けた任意の角度での測定を実現しました。
- 👁️ 車椅子の患者様や乳幼児、外来や往診など、人と場所を選ばずご利用いただけます。



TA031 アイケアic200 手持眼圧計 ¥1,280,000
 アイケアic200は、アイケアフィンランド社により開発された麻酔薬不要の手持眼圧計です。
 ※他のアイケア社製品(アイケア/アイケアPRO/ic100/トノベット)も収納できます。

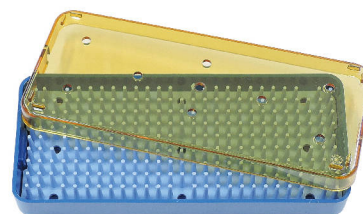

2600A マイクロトレー マット付 152×64×19mm ¥4,800
 ゼネラルエレクトリック社が開発した「ウルテム」を用いた軽量で耐久性に優れた製品です。ベアトレー内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベアトレーが密着するのを防ぐ為、乾燥を促進させます。
 ガス滅菌や薬液消毒の他、160°までのオートクレーブにも耐えられます。

