

# フレキシブル鉗子

## 「セルメン」


210mm

把持鉗子 HK1.2 / 生検鉗子 SE1.5

細いのにフレキシブルに  
曲げて確実に患部をとらえます！

115mm

把持鉗子 HK1.2-S

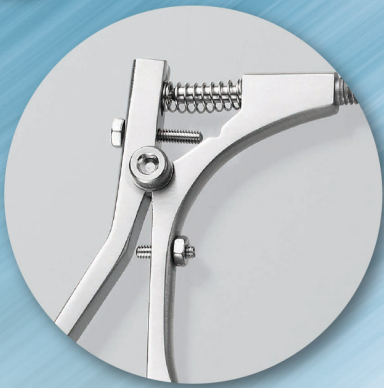

ハンドル部のストッパー機能が先端部開閉時にかかる過度のストレスを抑えるため、壊れにくい構造です。



生検鉗子「セルメンSE1.5」



把持鉗子「セルメンHK1.2」



コデン株式会社

# フレキシブル鉗子「セルメン」

細いのにフレキシブルに曲げて確実に患部をとらえます！

ハンドル部のストッパー機能が先端部開閉時にかかる  
過度のストレスを抑えるため、**先端部は壊れにくい構造です。**

- ワイヤー部径1.2mmの細さにもかかわらず、確かな把持力と採取力があります。
- ワイヤー部がフレキシブル構造になっているので、操作性が良好です。
- 動物の外耳から鼓膜、口腔、鼻に直接または鉗子挿入器具を使用し異物を把持、もしくは組織採取ができます。
- 耐熱性素材のため鉗子全体をオートクレーブ滅菌可能です。



商 品 名	セルメンHK1.2, セルメンHK1.2-S, セルメンSE1.5 希望小売価格：各110,000円(税別)	
サ イ ズ	セルメンHK1.2 362mm(全長)×102 mm(幅)×1.2mm(ワイヤー部径)×39g(重量)	セルメンSE1.5 230mm(全長)×102 mm(幅)×1.2mm(ワイヤー部径)×37g(重量)
材 質	先端部・ワイヤー部・ハンドル部：ステンレス製, 根元補強：耐熱樹脂	
耐 熱 性	135℃, オートクレーブ滅菌可能	
動物用医療機器 届 出 番 号	把持鉗子セルメンHK1.2 : 4動薬第938号	把持鉗子セルメンHK1.2-S : 4動薬第938号
	生検鉗子セルメンSE1.5 : 2動薬第210号	

※品目、製品情報、製品仕様、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。  
詳細については弊社製品取扱販売店へご確認ください。

【発売元】



コデン株式会社

[www.coden.co.jp](http://www.coden.co.jp)  
[info@coden.co.jp](mailto:info@coden.co.jp)

東京都豊島区巣鴨1丁目4番16号  
TEL.03-5981-8611 FAX.03-5981-8878

【販売元】



株式会社 エムイーテクニカ

<http://www.metecnica.co.jp/>

本社	〒170-0002	東京都豊島区巣鴨1-34-4	TEL.03-5395-4588
大阪	〒533-0012	大阪市東淀川区大道南3-2-12	TEL.06-6829-7912
札幌	〒007-0884	札幌市東区北丘珠四条1-20-2	TEL.011-792-6522
仙台	〒981-3133	仙台市泉区泉中央1-9-2-203	TEL.022-739-7975
福岡	〒812-0004	福岡市博多区榎田1-8-28	TEL.092-432-3740