


G-S03930 VECSマルチ灌流カニューラ

¥164,000

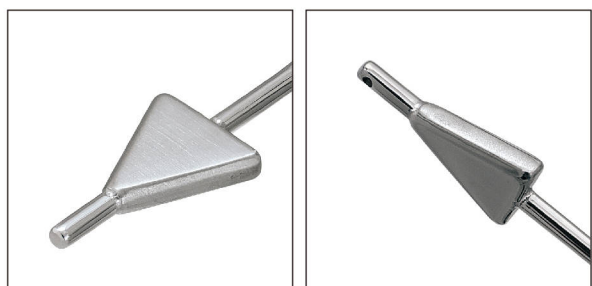

サイズの異なる切開創においても、前房を安定した状態に保つことができるようデザインされたマルチ灌流カニューラです。筒状に加工された先端部は20Gのサイドポートから挿入可能で、三角状の突起が最大5mmまでの切開創を閉鎖します。バイマニュアルI/Aハンドピースによる皮質吸引の際、本カニューラを灌流ハンドピースとして使用して切開創より挿入することで、創口は閉鎖され前房を安定した状態に保つことができます。