


M-8613-008

サミット 4Kウロカメラヘッド用トレー

¥ 198,000 (税別)

■ OLYMPUS:CH-S700-08-LB

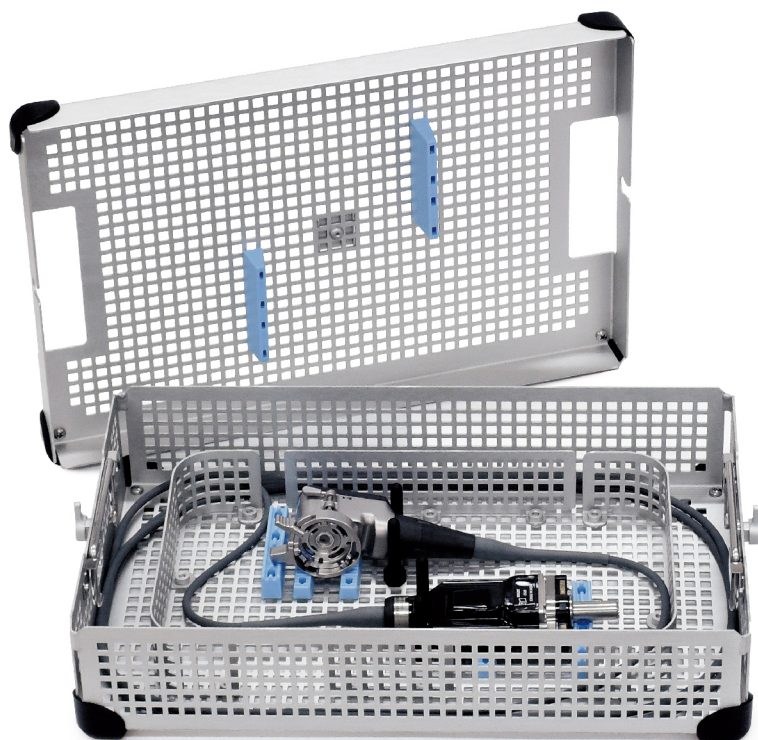

#### 滅菌方法


プラズマ滅菌  
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌  
過酸化水素滅菌 (STERIS社)

#### 材質


アルミニウム・シリコン

#### サイズ

内寸: 387×244×76mm  
外寸: 410×260×96mm

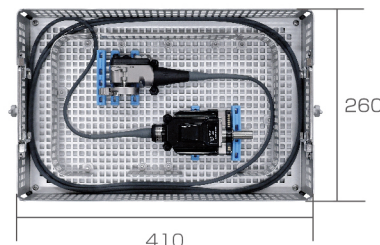

## 製品の特長

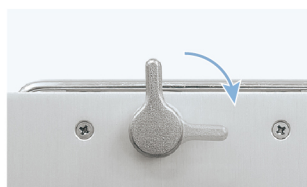


### レバー操作でフタを 確実にロック

レバーを90°回転させロックします。  
フタが正しい向きでないとロック  
できません。




### 持ち運びに便利な 格納式ハンドル

ハンドルが付いており、安全に持ち  
運びができます。格納式なので滅菌  
バッグなどに引っかかりません。

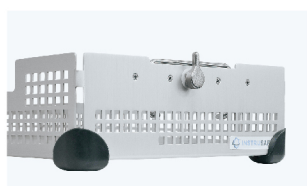

### 破れを防ぐ! 安心のコーナーガード

シリコン製のコーナーガードにより  
滅菌バッグなどの破れを防ぎます。

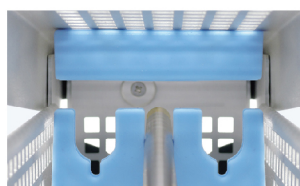

### 360°全方位から 製品の保護

豊富な種類のシリコンバーを組み  
合わせ、収納器具に合わせた形で  
固定・保護します。

