


INTRUSAFE

M-7782-022

腹腔鏡下リニアプローブ用トレー

■FUJIFILM:L43LAP

¥ 262,500 税別

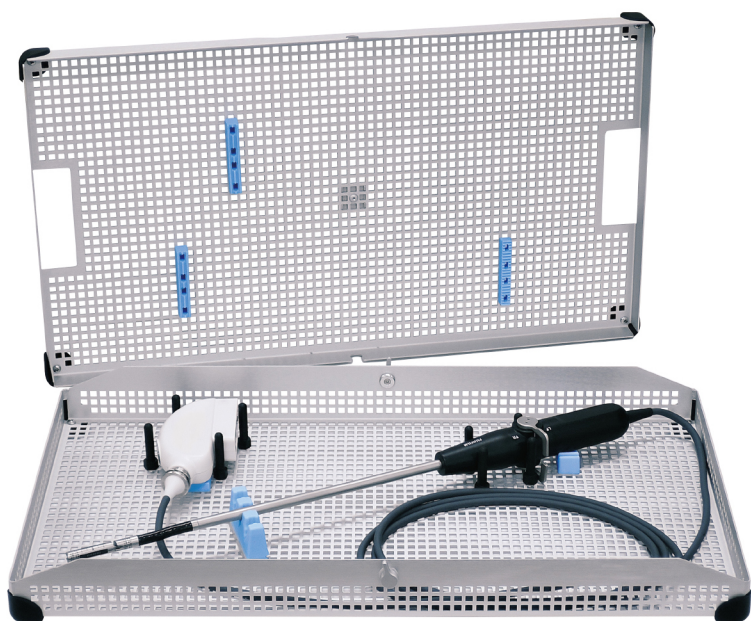

滅菌方法


プラズマ滅菌・EOG滅菌
過酸化水素滅菌 (STERIS社)

材質


アルミニウム・シリコン

サイズ

内寸:632×345×60mm
外寸:640×370×80mm

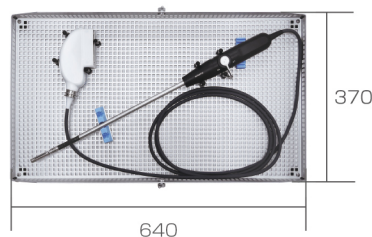


製品の特長

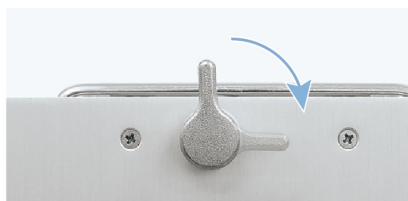

レバー操作でフタを 確実にロック

レバーを90°回転させロックします。フタが正しい向きでないとロックできません。

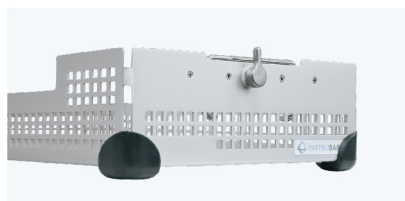

破れを防ぐ! 安心のコーナーガード

シリコン製のコーナーガードにより滅菌バッグなどの破れを防ぎます。



360°全方位から 製品の保護

豊富な種類のシリコンバーを組み合わせ、収納器具に合わせた形で固定・保護します。

